

# **STERIWIPES C**

Lingettes désinfectantes de surfaces



## STERIWIPES C


Le produit phare de Cleanplanet.  
Les lingettes Steriwipes C ont prouvé leur efficacité au fil du temps et occupent une place fondamentale dans notre entreprise.

Imbibées de SteriPro C, ces lingettes désinfectantes permettent un nettoyage ainsi qu'une désinfection rapide de toutes surfaces et petit matériel non-invasif.

Bactéricide, fongicide et virucide, elles sont efficaces contre les bactéries standards, les mycobactéries, les champignons et contre le HBV et HIV.

Utilisé par de nombreux hôpitaux romands et autres professionnels, les lingettes Steriwipes C offrent une désinfection complète en 60 secondes.

La solution est composée d'une formule à base d'alcool sans produits chimiques, afin de diminuer notre impact sur la planète.

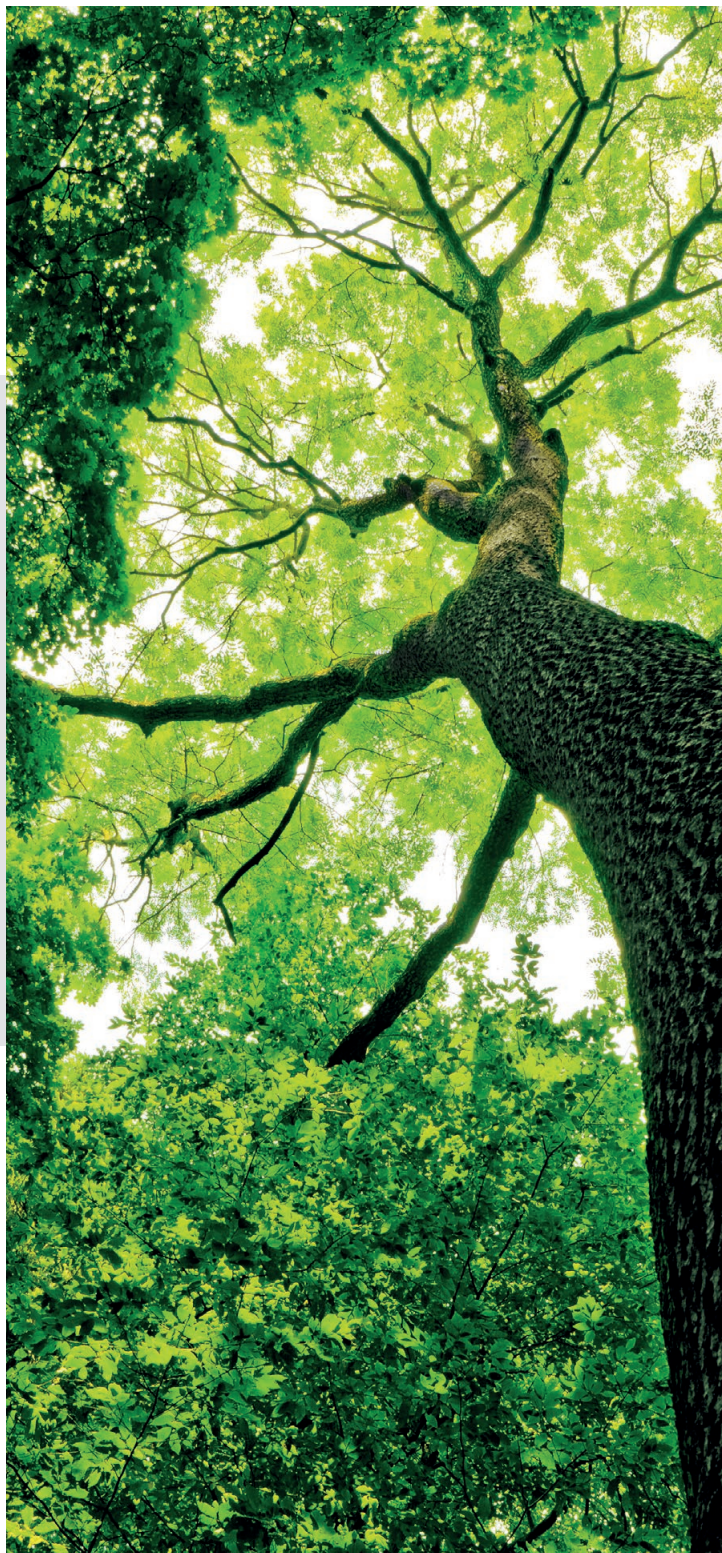

 **Cleanplanet**<sup>®</sup>

MÉTHODES ET PRODUITS D'HYGIÈNE

Cleanplanet SA  
1228 Plan-les-Ouates  
Tél. 022 784 32 48  
cleanplanet@cleanplanet.ch  
[www.cleanplanet.ch](http://www.cleanplanet.ch)

## Lingettes désinfectantes de surfaces

### Application

Lingettes pour la désinfection rapide de petit matériel médical résistant à l'alcool ainsi que toutes surfaces tels que WC, téléphones, point de contact, couverts, verres, assiettes, tables, robinets et équipements non-invasifs.

Humecter l'ensemble de la surface à désinfecter. Utiliser une lingette désinfectante sur une surface de 0,5 m x 0,5 m en laissant agir une minute.

Une fois toutes les lingettes utilisées, le dispenser peut être rechargé.

### Avantages

- Lingettes prêtes à l'emploi
- Désinfection rapide et efficace
- Grand spectre d'activité : Bactéricide, Fongicide, Mycobactéricide, Virucide
- Séchage rapide, sans trace
- Adapté en milieu médical et pour les zones alimentaires
- Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Ne jaunit pas les surfaces
- Couvercle refermable évitant la contamination et l'évaporation de la solution
- Dispenser réutilisable

### Particularités

- Sans parfum
- Ph neutre
- Composé alcoolique exempt d'aldéhydes et amines
- Utilisation manuelle, par frottement

### Remarques

Afin d'utiliser les lingettes en toute sécurité, lire l'étiquette avant toute utilisation.

Fiche technique et fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

### Normes

Numéro d'autorisation : CHZN 4241

Biocide TP1 - TP2 - TP4

UFI : ORFR-NAQM-600F-PNJV

CONDITIONNEMENT / RÉFÉRENCES




#### Dispenser 800 lingettes

Réf. 120420-800

EAN 9500615760333

Pharmacode (En cours)

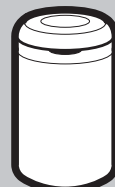


#### Dispenser 200 lingettes

Réf. 120420

EAN 9505587752478

Pharmacode 07770944

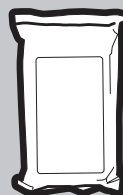


#### Recharge 200 lingettes

Réf. 120422

EAN 9507615962477

Pharmacode 07770945

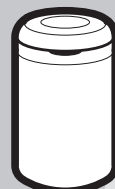

#### Dispenser 25 grandes lingettes

Réf. 120421

EAN 9507428345665

Pharmacode (En cours)




#### Recharge 25 grandes lingettes

Réf. 120423

EAN 9508121618513

Pharmacode (En cours)

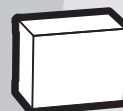

#### Boîte 10 lingettes individuelles

Réf. 120424-10

EAN 9500116673002

Pharmacode 07770946



#### Carton de 1000 lingettes en vrac

Réf. 120424-1000

### Spectre d'activité et temps de contact

Bactéricide (bactéries standards)	30 secondes
Fongicide (levures)	30 secondes
Mycobactéricide	60 secondes
Virucide (virus enveloppés de la grippe, Coronavirus)	30 secondes

